

取扱説明

電源




本体側面のボタンが押し込まれた状態になるまで押してください。起動音が鳴ります。一度電源をオンにすると、それ以降電源がオフになることはありません。

装着



本体の裏面のセンサー部分(銀色部分)が肌に密着するようにして、手の甲側に装着してください。

アラーム

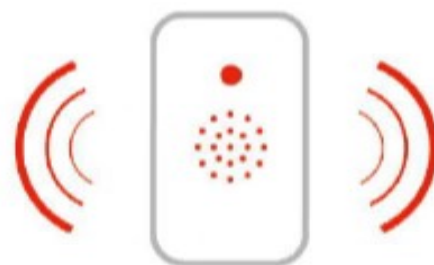

アラームは一大事になる前に鳴ります。アラームが鳴った場合は、塩分・水分補給や涼しい場所で休むなどの行動をとってください。

ベルトの付け外し



外す場合：ベルトを横にスライドさせて本体から外してください。付ける場合：ベルトを横にスライドさせて、ベルトが本体に固定されていることを確認してください。

ベルトの洗い方



糸くずの出ない柔らかい布で拭き取ってください。必要に応じて、綺麗な水で軽く湿らせてください。

廃棄



使用後は自治体の基準に沿って廃棄してください。